




Art.0154-i **CombiGym** - Stimolatore Auricolare "NoEating T.P.S."

"L'EATING EMOZIONALE"

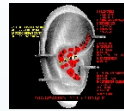

E-commerce-internet

● Descrizione

L'EATING EMOZIONALE, e "la situazione vissuta da soggetti che **in seguito a forti emozioni** (dovute a fattori biologici e/o psicologici ecc.) **usano il cibo** per far fronte a tali emozioni, questo solo per soddisfare la sensazione di fame nonostante ciò non si ha un reale bisogno biologico.

L'apparecchio **CombiGym "NoEating T.P.S."** è un apparecchio tecnologicamente avanzato per la stimolazione auricolare dotato anche di rilevatore acustico dei Trigger Point, e ciò permette la ricerca e la stimolazione dei punti auricolari secondo la tecnica di Nogier, che ha rielaborato gli antichi concetti orientali sviluppando poi un metodo del tutto indipendente e autonomo.

Secondo la tecnica di Nogier sull'orecchio umano sono riflessi tutti gli organi, gli apparati e le funzioni dell'organismo umano, stimolando questi punti con stimolazioni elettriche, si **favorisce il riequilibrio dello status naturale psico-fisico**. Con riferimento alla metodica francese, stimolando determinati punti dell'orecchio (sx, dx) in successione, si induce il soggetto ad uno "status di riequilibrio psico-fisico".

Con **CombiGym "NoEating T.P.S."** possiamo eseguire applicazioni per il fenomeno della **fame nervosa**, poiché lo stesso è dotato di un programma completo di ben **28 protocolli memorizzati** e ampiamente collaudati.

L'apparato è dotato di un display alfanumerico ben visibile pre-illuminato interattivo dove l'utente può leggere, selezionare i protocolli e visionare il punto selezionato riportato sulla figura rappresentativa sia dell'orecchio destro che quello sinistro.

L'utente può interagire con l'apparato a mani libere, utilizzando il solo pedale in dotazione. Le applicazioni di stimolazione auricolare si effettuano con il puntale in dotazione.

L'apparecchio serie **CombiGym** modello "NoEating T.P.S." ccon riferimento alla direttiva 93/42 CEE e le successive modifiche, non è un dispositivo medico ed è conforme alle normative tecniche CEI EN 60601- 1, CEI EN 60601- 1- 2, e CEI EN 60601-2-10.

Garanzia normativa Europea, corredato di accessori.

La Società EuroAge è certificata con il **Sistema di Garanzia della Qualità**, con l'organismo notificato CERMET n. 0476.

● Accessori in dotazione con l'Apparecchio

Art. 0162 n° 1 Puntale dotato di 4 microsferi intercambiabile, e cavo lung. 1 mt.

Art. 0302 n° 1 Adattatore esterno carica batteria

Art. 0351 n° 1 Pedale con cavo lung. 1,5 mt.

Art. 0370 n° 1 Confezione gel ECG 260 g.

n° 1 Manuale d'uso in Italiano

● Accessori opzionali (non in dotazione con l'apparecchio) disponibili su richiesta:

Art. 0280 Valigia porta-strumento in polipropilene color Grigio, cm. 32,5 x 46,0 x 14,5

● Caratteristiche Tecniche

Apparato: Elettrostimolatore auricolare per l'estetica

Canali d'uscita : 1 canale d'uscita puntale_cerca-punti

1 canale d'uscita _pedale

- possibilità di escludere il buzzer_cerca-punti

Prgrammi : 29 protocolli prememorizzati

Timer : prememorizzato.

Tipo d'impulso : pre-memorizzato.

Intensità d'uscita : da 0 a 500 microA.

Strumento ad ago misuratore d'intensità: max 500 microA.

● Caratteristiche Tecniche

Circuito d'uscita : tipo A

Alimentazione: batteria ricaricabile 7.0 Ah (con adattatore di rete.

Adattatore di rete: 14 Vcc 1A max.

Classe di sicurezza : I (secondo EN 60601-1)

Grado di protezione apparato : IP 40

Dimensioni : 43 x 32,5 x 14,5 x 3,5 cm. (L x P x H x H)

Peso apparato : Kg. 3,736

Peso adattatore: 0,278 Kg.